


SCHEDA TECNICA

AULA A PETTINE MONOFRONTE 6 POSTI

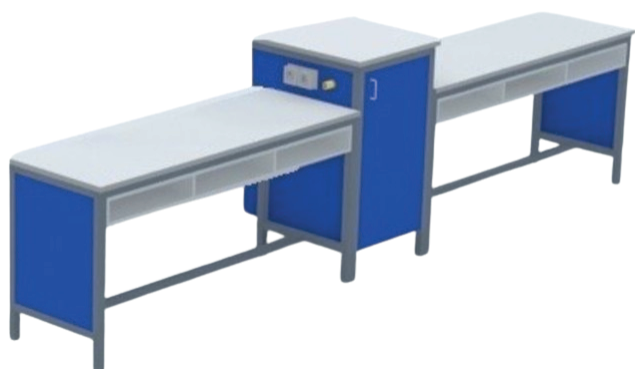

CODICE PRODOTTO:
Sito: ARPTT001
Codice Me.Pa: ARPTT001

DIMENSIONI:
- 420x75x110 H

DESCRIZIONE:

Le aule a pettine rappresentano una delle soluzioni più razionali ed economiche per il laboratorio. Le adduzioni generali acqua, gas ed elettricità e lo scarico acqua, sono collocate in un'unica ristretta arca in testa, a richiesta in coda al complesso a pettine. Le tubazioni e le diramazioni ai servizi sui banchi sono alloggiare nel tunnel centrale di collegamento, riducendo così al massimo i punti di adduzione e scarico dell'aula. I complessi a pettine sono costituiti fondamentalmente da una serie di banchi base accoppiati tra loro attraverso il tunnel di collegamento. Negli elementi monofronte viene fornito uno sportello sul fronte di lavoro, mentre in quelli bifronte gli sportelli sono su ambo i lati. Le antine sono completamente estraibili per l'ispezione degli impianti ricavati all'interno. Dimensioni singole di ogni prodotto: 180X75X90 H - 65X75X 110H - 180X75X90 H

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/aula-a-pettine-monofronte-6-posti/

