


## SCHEMA TECNICA

# BANCO A PARETE CON PIANO IN LAMINATO

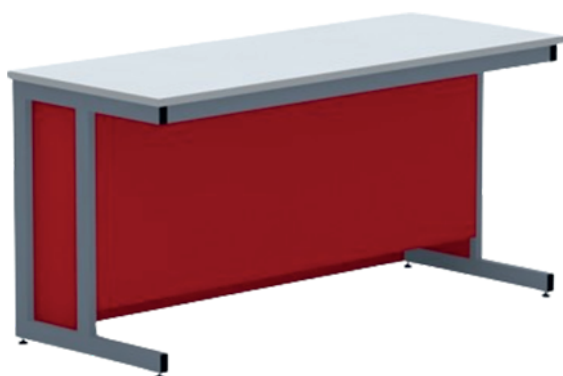

**CODICE PRODOTTO:**

Sito: BP-150

Codice Me.Pa: BP-150

**DIMENSIONI:**


- 150 × 75 × 90 H

### DESCRIZIONE:

La struttura portante modulare è realizzata con tubolare in ferro decapato a sezione rettangolare mm.60x30x2 verniciata di colore RAL 7001 con polveri epossidiche applicate con metodo elettrostatico ed essiccate a forno previo sgrassaggio, fosfatazione e passivazione ecologica antiacida. Le strutture portanti di un banco da laboratorio si identificano nell'insieme di fiancate esterne, moduli superiori orizzontali e moduli verticali saldate con saldatura ad arco. Le fiancate esterne sono munite di pannelli in lamiera per poter predisporre i fori di passaggio per tutte le utenze, mentre sui moduli verticali sono applicati pannelli sganciabili in nobilitato ignifugo, con reazione al fuoco E1. Le fiancate esterne sono munite da un sistema di livellamento, mediante piedini regolatori, realizzati in materiale poliestere.

### COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.

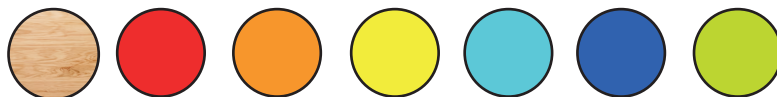

**LINK PRODOTTO:**

[www.arrelab.it/product/banco-a-parete-con-piano-in-laminato-bp-150/](http://www.arrelab.it/product/banco-a-parete-con-piano-in-laminato-bp-150/)

