

SCHEDA TECNICA

BANCO LAVAGGIO CON UNA VASCA



CODICE PRODOTTO:

Sito: GLA-120

Codice Me.Pa: GLA-120

DIMENSIONI:

- 120 × 75 × 90 H

DESCRIZIONE:

Tubolare a sezione rettangolare di 60x30x2mm, parete tecnica chiusa ad un ripiano in lamiera pressopiegata antigocciolo, verniciata con polveri epossidiche applicate con metodo elettrostatico ed essiccate a forno previo sgrassaggio, fosfatazione e passivazione ecologica. Piedini inferiori regolabili in plastica.

- VASCA

In gres porcellanato ed uno sgocciolatoio, completo di troppopieno e sifone in moplen.

- MISCELATORE DA PARETE A GOMITO


Miscelatore da parete per acqua calda e fredda con bocca girevole e comando a gomito.

- ARMADIETTO

Realizzato con pannelli di conglomerato spessore mm.18 biplaccato in laminato plastico, avente due ante. Normativa Italiana CSE 2/75/A e CSE RF 3/77.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.

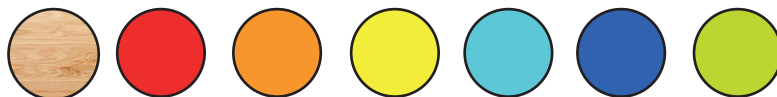

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-lavaggio-con-una-vasca-gla-120/

